

- wysoka dokładność ważenia
- kalibracja zewnętrznym odważnikiem
- wyświetlacz LCD
- złącze RS232C do komputera lub drukarki
- sporządzanie receptur, wskazania w %, liczenie sztuk
- inne funkcje specjalne



AD6



AD510-AD5  
AD1000-AD3000



AD250  
AD50-AD600

seria AD

WAGI LABORATORYJNE

**WAGI LABORATORYJNE seria AD**

Wagi laboratoryjne serii AD są przydatne wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka dokładność ważenia, w szczególności w laboratoriach, aptekach i zakładach jubilerskich. Charakteryzują się przyjemnym wyglądem i łatwością obsługi. Sprawdzone rozwiązanie konstrukcyjne mechanizmów wag zapewnia im wieloletnią eksploatację.

Wszystkie wagi otrzymują standardowy pakiet funkcji specjalnych: liczenie sztuk jednakowych detali, wyliczanie zmian masy w procentach, sporządzanie receptur, zmiana jednostek pomiarowych (ct, lb, oz, ozt) i inne. Złącze RS232C pozwala na podłączenie komputera lub drukarki w celu drukowania kwitów, raportów lub archiwizacji wyników ważenia w komputerze. Program komputerowy *Procell* umożliwia bezpośrednie umieszczanie wyników ważenia w arkuszu kalkulacyjnym *Excel*.

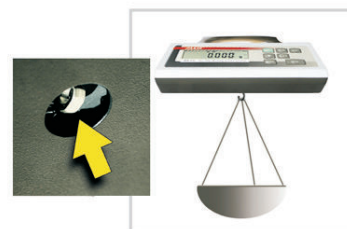
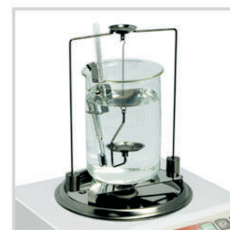
Wszystkie wagi spełniają wymagania przepisów Unii Europejskiej, o czym informuje znak CE na tabliczce firmowej. Na zamówienie wszystkie wagi mogą być wzorcowane, typy wskazane w tabeli mogą być poddane legalizacji WE. Wagi legalizowane otrzymują oznakowanie metrologiczne **M**.

Opcje na zamówienie:

- dodatkowy wyświetlacz
- zestaw Hydro AD do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy (wagi precyzyjne AD50÷AD500)
- hak do podwieszania ważonej masy
- klosz osłaniający szalkę (wagi z szalką  $\phi 115\text{mm}$ )
- współpraca z drukarką etykiet
- zegar wewnętrzny, selekcja progowa, statystyka i inne funkcje specjalne

**Opcje na zamówienie:**

Dodatkowy wyświetlacz

Sposób podwieszania  
ważonej masyZestaw Hydro AD  
do pomiaru gęstościKlosz osłaniający szalkę  
(AD250, AD50-AD500)

| Dane techniczne                       | wagi popularne             |              |                     |              |              |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| Typ wagi                              | <b>AD250</b>               | <b>AD510</b> | <b>AD2.5</b>        | <b>AD5</b>   | <b>AD6</b>   |
| Obciążenie (Max)                      | 250g                       | 500g         | 2500g               | 5000g        | 6000g        |
| Działka odczytowa (d)                 | 0,01g                      | 0,01g        | 0,5g (0,1g*)        | 0,5g (0,1g*) | 0,5g (0,1g*) |
| Działka legalizacyjna (e)             | 0,1g                       | 0,1g         | 0,5g                | 0,5g         | 0,5g         |
| Wymiar szalki                         | $\phi 115\text{mm}$        |              | $\phi 150\text{mm}$ |              | 225x165mm    |
| Klasa dokładności                     | II                         |              |                     |              |              |
| Temperatura pracy                     | +18 ÷ +33°C                |              |                     |              |              |
| Czas ważenia                          | <5s                        |              |                     |              |              |
| Wymiary wagi                          | 240x275x90mm               |              |                     |              |              |
| Zasilanie                             | ~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A |              |                     |              |              |
| Masa wagi                             |                            |              | 4kg                 |              | 4,5kg        |
| Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) | F2 200g                    | F2 500g      | F2 1000g            | F2 2000g     |              |
| Legalizacja WE                        | -                          | <b>M</b>     | <b>M</b>            | <b>M</b>     | <b>M</b>     |

\* bez możliwości legalizacji WE

|   | A        | B |
|---|----------|---|
| 1 | Masa [g] |   |
| 2 | 10,20    |   |
| 3 | 9,91     |   |
| 4 | 10,15    |   |
| 5 | 10,50    |   |
| 6 | 9,82     |   |
| 7 | 10,31    |   |

Eksport wyników  
do arkusza Excel

| Dane techniczne                       |  |                            |  |         |  |         |  |         |  | wagi precyzyjne |  |         |  |          |  |          |  |          |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-----------------|--|---------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| Typ wagi                              |  | AD50                       |  | AD100   |  | AD200   |  | AD300   |  | AD500           |  | AD600   |  | AD1000   |  | AD2000   |  | AD3000   |  |
| Obciążenie (Max)                      |  | 50g                        |  | 100g    |  | 200g    |  | 300g    |  | 500g            |  | 600g    |  | 1000g    |  | 2000g    |  | 3000g    |  |
| Działka odczytowa (d)                 |  | 0,001g                     |  | 0,001g  |  | 0,001g  |  | 0,001g  |  | 0,001g          |  | 0,002g  |  | 0,01g    |  | 0,01g    |  | 0,01g    |  |
| Działka legalizacyjna (e)             |  | 0,01g                      |  | 0,01g   |  | 0,01g   |  | 0,01g   |  | 0,01g           |  | 0,02g   |  | 0,1g     |  | 0,1g     |  | 0,1g     |  |
| Wymiar szalki                         |  | ϕ115mm                     |  |         |  |         |  |         |  |                 |  |         |  | ϕ150mm   |  |          |  |          |  |
| Klasa dokładności                     |  | II                         |  |         |  |         |  |         |  |                 |  |         |  |          |  |          |  |          |  |
| Temperatura pracy                     |  | +18 ÷ +33°C                |  |         |  |         |  |         |  |                 |  |         |  |          |  |          |  |          |  |
| Czas ważenia                          |  | <8s                        |  |         |  |         |  |         |  |                 |  |         |  | <5s      |  |          |  |          |  |
| Wymiary wagi                          |  | 240x275x90mm               |  |         |  |         |  |         |  |                 |  |         |  |          |  |          |  |          |  |
| Zasilanie                             |  | ~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A |  |         |  |         |  |         |  |                 |  |         |  |          |  |          |  |          |  |
| Masa wagi                             |  | 4kg                        |  |         |  |         |  |         |  |                 |  |         |  |          |  |          |  |          |  |
| Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) |  | F2 50g                     |  | F2 100g |  | F2 200g |  | F2 200g |  | F1 500g         |  | F2 500g |  | F2 1000g |  | F2 2000g |  | F2 2000g |  |
| Legalizacja WE                        |  | M                          |  | M       |  | M       |  | -       |  | -               |  | -       |  | M        |  | M        |  | -        |  |